

DeClogger® für die enterale Ernährungssonde

Der Bionix® DeClogger unterstützt Ärzte und Pflegekräfte beim Freimachen verstopfter G-, J- und PEG-Sonden in weniger als zwei Minuten, um die Medikamentenabgabe wiederherzustellen und einen vorzeitigen Sondenwechsel zu vermeiden.



PROBLEM

Im Laufe der Zeit verstopfen G-, J- und PEG-Sonden unweigerlich und verhindern somit, dass Patienten Nahrungsmittel und Medikamente erhalten.

LÖSUNG

Der DeClogger, ein sicheres, flexibles Instrument, das sich mit seinem Gewinde durch Verstopfungen bohrt und so schnell die Nahrungsmittel- und Medikamentenversorgung von Patienten mit verstopften enteralen Ernährungssonden wiederherstellt.

ERGEBNISSE

Enterale Ernährungssonden, die in weniger als zwei Minuten von Verstopfungen befreit werden und die Patienten wieder mit den benötigten Nahrungsmitteln und Medikamenten versorgen.

„Dank dem DeClogger muss ich die Sonden viel seltener wechseln.“

- Dr. Scott Polsky



Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53 • 1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2.732.59.54 • Fax: +(32) 2.732.60.03 • E-Mail: mail@obelis.net
Bionix LLC • 1670 Indian Wood Circle, Maumee, Ohio 43537, United States
Phone: +1 419.727.8421 • Fax: +1 800.455.5678 • www.Bionix.com



INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR ALLTÄGLICHE PROBLEME


+1 800 551 7096 • www.bionix.com

©2021 Bionix LLC | INTL-0030-DE | Rev. C

DeClogger® für die enterale Ernährungssonde

PRODUKTANGEBOT – Der DeClogger ist in Packungen à 10 Stück erhältlich.

GASTROSTOMIE ODER JEJUNOSTOMIE

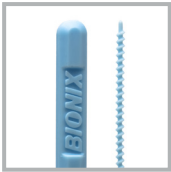

Blauer DeClogger | Nr. 911
Größe: 14–16 French
Länge: 39,5 cm
ENFit® kompatibel



Gelber DeClogger | Nr. 912
Größe: 16–22 French
Länge: 39,5 cm
ENFit® kompatibel



Grüner DeClogger | Nr. 913
Größe: 20–22 French
Länge: 39,5 cm
Nicht mit ENFit® kompatibel

PEG ODER ERSATZ



Brauner DeClogger | Nr. 921
Größe: 14–16 French
Länge: 21,5 cm
ENFit® kompatibel



Oranger DeClogger | Nr. 922
Größe: 18–24 French
Länge: 21,5 cm
ENFit® kompatibel

PRÜFSTANDVERSUCHE

Durchgeführter Prüfstandversuch	Testart	Szenario	Testanzahl	Testergebnisse	Verhältnis V/E
Entfernung der Verstopfung	Simulierte Nutzung	Max. Sonden- dengröße & min. Sonden- dengröße; Worst-Case-Szenario	n=30/Sonden- größe	100 % erfolgreich	95/90
Dauer bis zur Entfernung				Durchschn. + SA < 2,0 min.	
Komponentenausfall				Keine Ausfälle	
ENFit-Kompatibilität				100 % kompatibel	

*Die Labor-Prüfstandtests wurden bei Bionix als Worst-Case-Szenarien durchgeführt. Die Sonden wurden mit einer geronnenen Eiweiß- und Fasermischung verstopft. Die Verstopfungen wurde anhand der DeClogger® Gebrauchsanweisung vorbereitet und beseitigt. Die Zeit für das gesamte Verfahren von der Durchgängigkeitsprüfung bis zur sichtbaren Beseitigung der Verstopfung (Kontrolle mittels einer Spritze) wurde mit einer Stoppuhr gemessen. Das Worst-Case-Szenario wird definiert als die für jede DeClogger-Art angegebene größte und kleinste Sonde. Eine ENFit-Kompatibilität liegt vor, wenn der DeClogger problemlos in die für ENFit zugelassene Ernährungsvorrichtung eingeführt werden kann, ohne dass ein besonderer Kraftaufwand nötig ist.

ENFit® und NREit™ sind Marken von GEDSA.



INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR ALLTÄGLICHE PROBLEME

+1 800 551 7096 • www.bionix.com